




# EST-90

Table Operatoire  
Hydraulique Universelle

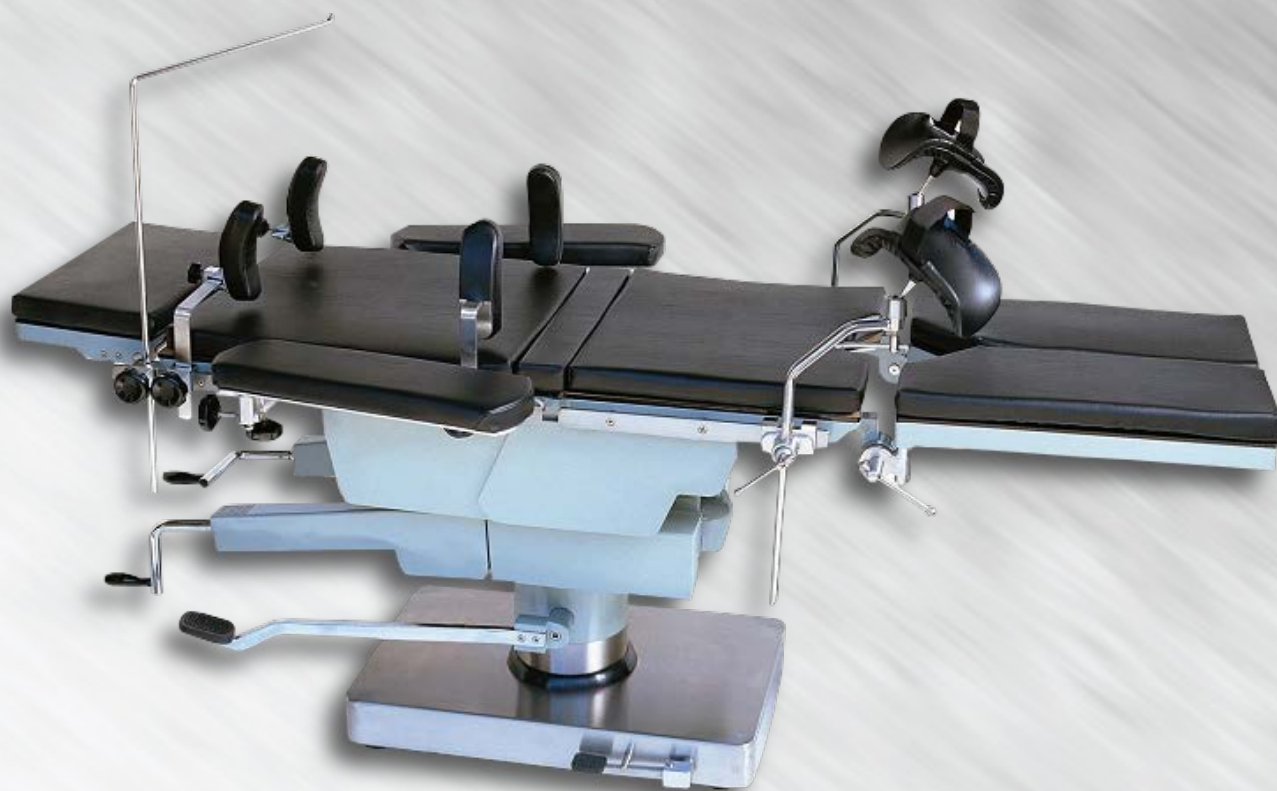


BLOC OPERATOIRE





# EST-90

## Table Operatoire Hydraulique Universelle

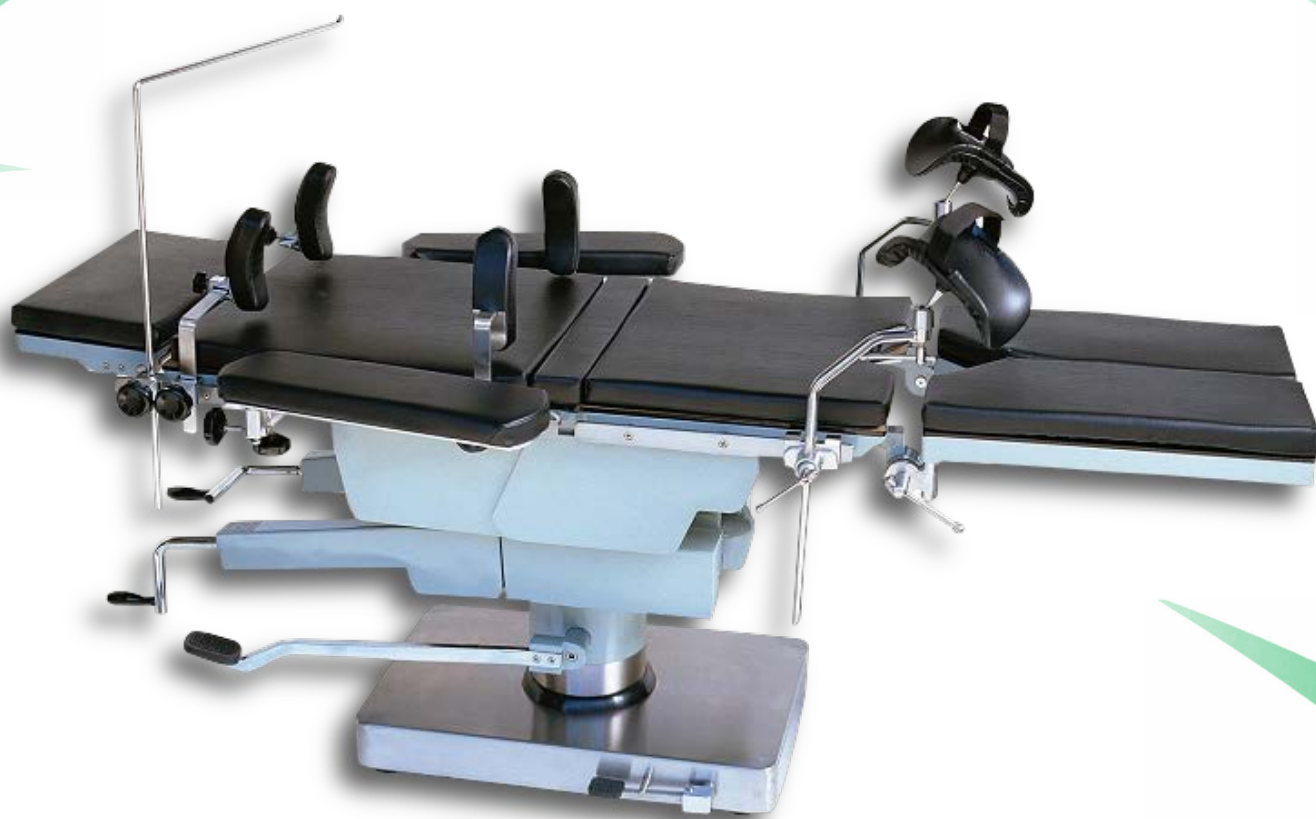

Conçu pour répondre à différentes exigences chirurgicales, l'EST-90 est une table opératoire universelle avec un système de commande HEAD-END. Sa conception est adaptée à toutes les besoins.

- Construction de base stable avec quatre roulettes qui permettent de déplacer et manœuvrer la table d'opération avec facilité.
- Système de freinage par pédale
- Position de déclive et inclinaison latérale réglables par manivelles
- Base, rails latéraux, accessoires et clamps en acier inoxydable #304
- Élévation du plan de couchage contrôlée par système hydraulique
- Le plan de couchage est divisé en 5 sections, y compris la tête, le dossier, la plaque siège et la section jambes en deux parties.
- Rotation complète de 360° de toute la surface de la table
- Position pour la chirurgie rénale/spinale  
La table peut être ajustée aux positions de flexion/contre-flexion pour la chirurgie rénale/spinale

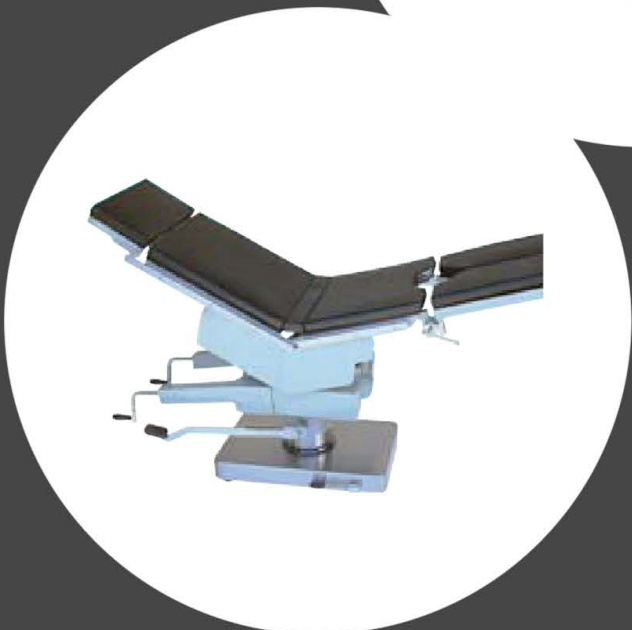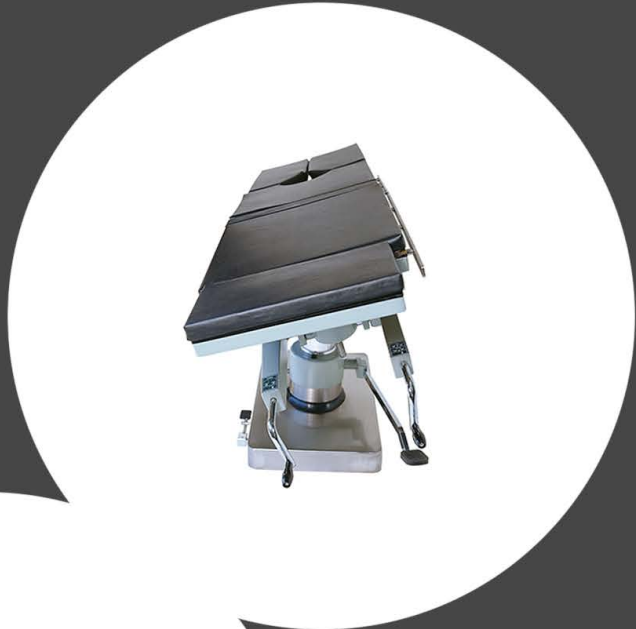



## Caractéristiques Techniques

Longueur du plan de couchage	200cm
Largeur du plan de couchage	50cm
Plage d'élévation du plan de couchage	68 - 100cm
Inclinaison latérale à gauche/droite	25°/25°
Déclive/Proclive	30°/22°
Inclinaison en haut/bas du dossier	+80° / -20°
Inclinaison en haut/bas de la tête	+30° /-90°
Inclinaison en haut/bas des jambes	20°/-90°
Inclinaison en haut/bas de la siège	+20° / -20°

### Accessoires Standard

Arceau d'anesthésie	1 set
Épaulières	1 pair
Support latéraux pour le corps	1 pair
Accoudoirs	1 pair
Appui-jambes de Goëpel	1 pair
Matelas	1 set

### Accessories en Option\*

Sangle de fixation	1 pc
Poignées	1 pair
Appui-tête en forme de U	1 set
Accoudoirs surélevés	1 set
Plan de couchage radiotransparente	1 set
Seau de collecte	1set

\* Pour la liste complète des accessoires en option, merci de consulter le catalogue dédié